




# EasyOne Pro® DLCO Portátil, Volumes Pulmonares e Espirometria

**AmaMedical Soluções em Saúde Ltda**  
Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar  
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170  
**[vendas@amamedical.com.br](mailto:vendas@amamedical.com.br)**  
**(11) 4384-2494**

## Saiba mais...

O EasyOne Pro® oferece a maneira mais eficiente e precisa de testar a função pulmonar em várias configurações. Projetado usando nossa tecnologia patenteada TrueFlow™ e TrueCheck™, o EasyOne Pro® elimina todas as fontes comuns de erro, economiza tempo e oferece a seus pacientes o melhor cuidado pulmonar em sua clínica ou laboratório de função pulmonar. Não há necessidade de uma caixa de corpo.

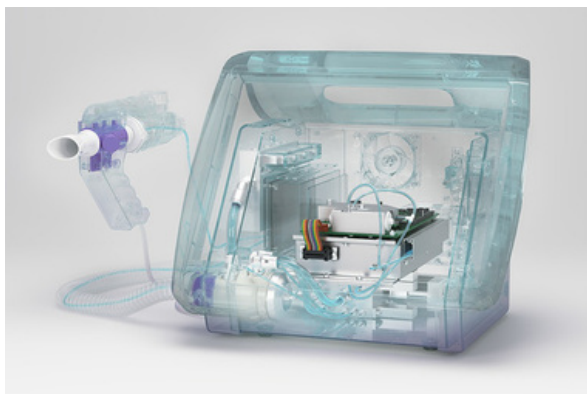


### Sempre seguro e pronto para testar

- TrueCheck™ O EasyOne Pro® é o único dispositivo comprovadamente preciso por toda a vida para medições DLCO.
- Livre de calibração com estabilidade
- Verifica a linearidade e o atraso do sensor de gás
- Verifica vazamentos e concentração de gás

### Tecnologia TrueFlow™ sem calibração

- Pare de se preocupar com a calibração ou precisão das medições de vazão. TrueFlow™ é a única tecnologia de ultrassom comprovadamente precisa por toda a vida para medições de fluxo e volume.
- Estabilidade comprovada a longo prazo
- Medição sem contato e sem resistência
- Excelente precisão e robustez

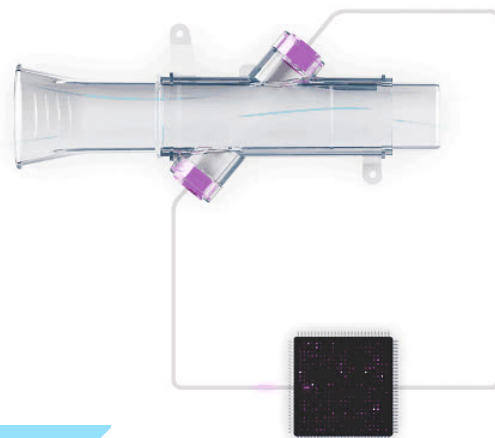

### Controle de infecções



- Evite a contaminação cruzada e reduza a limpeza ao mínimo absoluto:
- Todas as peças expostas à respiração do paciente são de uso único
- O sensor é protegido contra contaminação pelo bocal de respiração nnd
- Somente limpeza de superfície simples necessária do dispositivo

**AmaMedical Soluções em Saúde Ltda**

Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar  
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170

**[vendas@amamedical.com.br](mailto:vendas@amamedical.com.br)**

**(11) 4384-2494**

## Impressora e conectividade de rede




Fique conectado e compartilhe facilmente dados ou imprima relatórios. O EasyOne Pro® está equipado com uma moderna solução de PC integrada que torna as conexões de rede e impressora extremamente fáceis e estáveis.

- Compatibilidade com impressora USB/de rede
- Integre-se facilmente em qualquer rede
- USB, HDMI, Ethernet
- Dongle Wi-Fi opcional

## Conectividade EMR/EHR e dados centralizados

- Transmita e compartilhe dados entre dispositivos nnd ou para seu sistema de Registro Médico Eletrônico.
- Integrado em todos os principais sistemas EMR/EHR via HL7, XML, GDT ou API
- Referências para integração disponíveis mediante solicitação
- Banco de dados local simples ou servidor SQL
- Revise os resultados do teste de qualquer PC usando o EasyOne® Connect

## Análise e registro de dados brutos do sensor

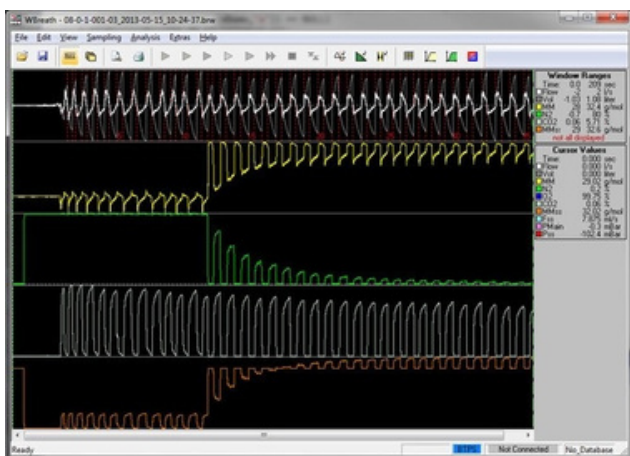

Vá além do teste de função pulmonar normal e obtenha acesso a todos os dados brutos de qualquer teste coletado.

A ferramenta WBreath é usada em configurações especiais de estudo, mas também por nossa equipe de suporte.

- Acesse e meça dados brutos
- Análise Avançada de Dados
- Totalmente integrado

## Protocolos de provocação personalizados

Personalize os protocolos de provocação padrão disponíveis para suas necessidades ou crie os seus próprios. Você pode instalar facilmente o protocolo de provocação personalizado em seus dispositivos ndd.



- Construa seus próprios protocolos de provocação
- Modifique os protocolos de provocação existentes
- Exporte e carregue protocolos em outros dispositivos

Protocolos pré-instalados: Manitol, MC, Provocação de Exercício

### Provocation - Methacholine (USA PI)

PC20: 5.37 mg/mL

Concentration	Administer Time	FEV1	Test Time	$\Delta$ Step [%]	$\Delta$ Base [%]
Pre	1:06 PM	4.81 L	1:07 PM		
0 mg/mL	1:07 PM	4.70 L	1:08 PM	-2.2 %	
0.025 mg/mL	1:08 PM	4.63 L	1:08 PM	-1.6 %	-1.6 %
0.25 mg/mL	1:08 PM	4.44 L	1:09 PM	-4.0 %	-5.5 %
2.5 mg/mL	1:09 PM	4.41 L	1:09 PM	-0.8 %	-6.3 %
10 mg/mL	1:09 PM	3.24 L	1:14 PM	-26.6 %	-31.2 %
Post	1:14 PM	4.73 L	1:14 PM		0.6 %

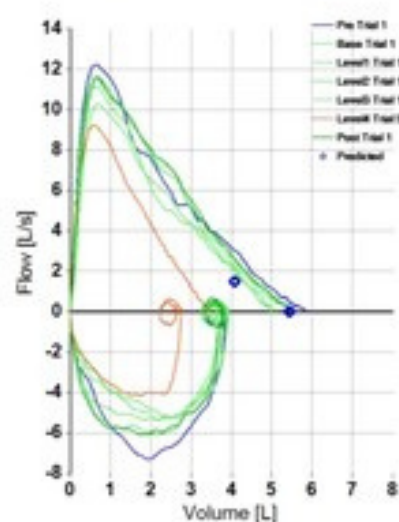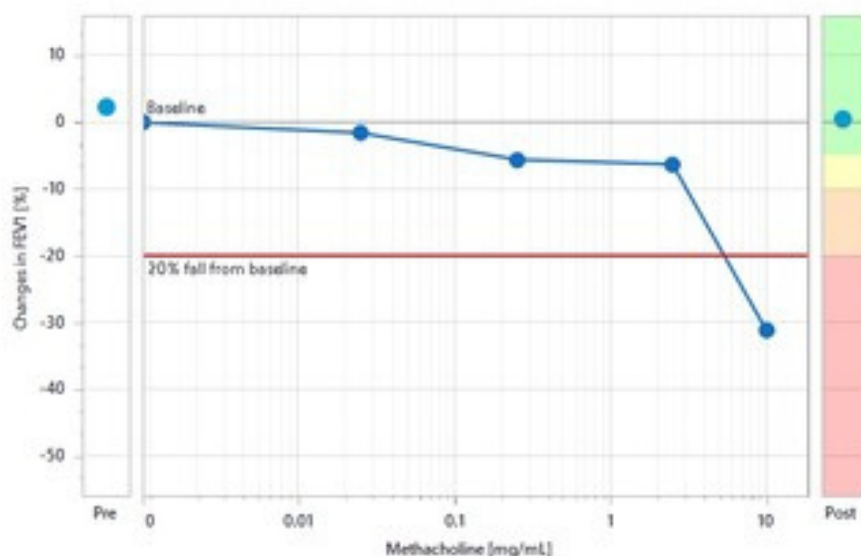

**AmaMedical Soluções em Saúde Ltda**

Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar  
 Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170


**ventas@amamedical.com.br**

**(11) 4384-2494**

## QC-Classificação e Interpretação de Resultados

Obtenha classificação e interpretação de qualidade automática com base em NLHEP e ATS/ERS com o EasyOne Pro®.

- Notas de qualidade baseadas em NLHEP e ATS/ERS 2005 e 2019 para todos os testes
- Árvore de decisão de interpretação ATS/ERS
- OURO/Hardie, NICE, JRS e NLHEP
- Diagnosticar asma, DPOC, enfisema e distúrbios vasculares pulmonares

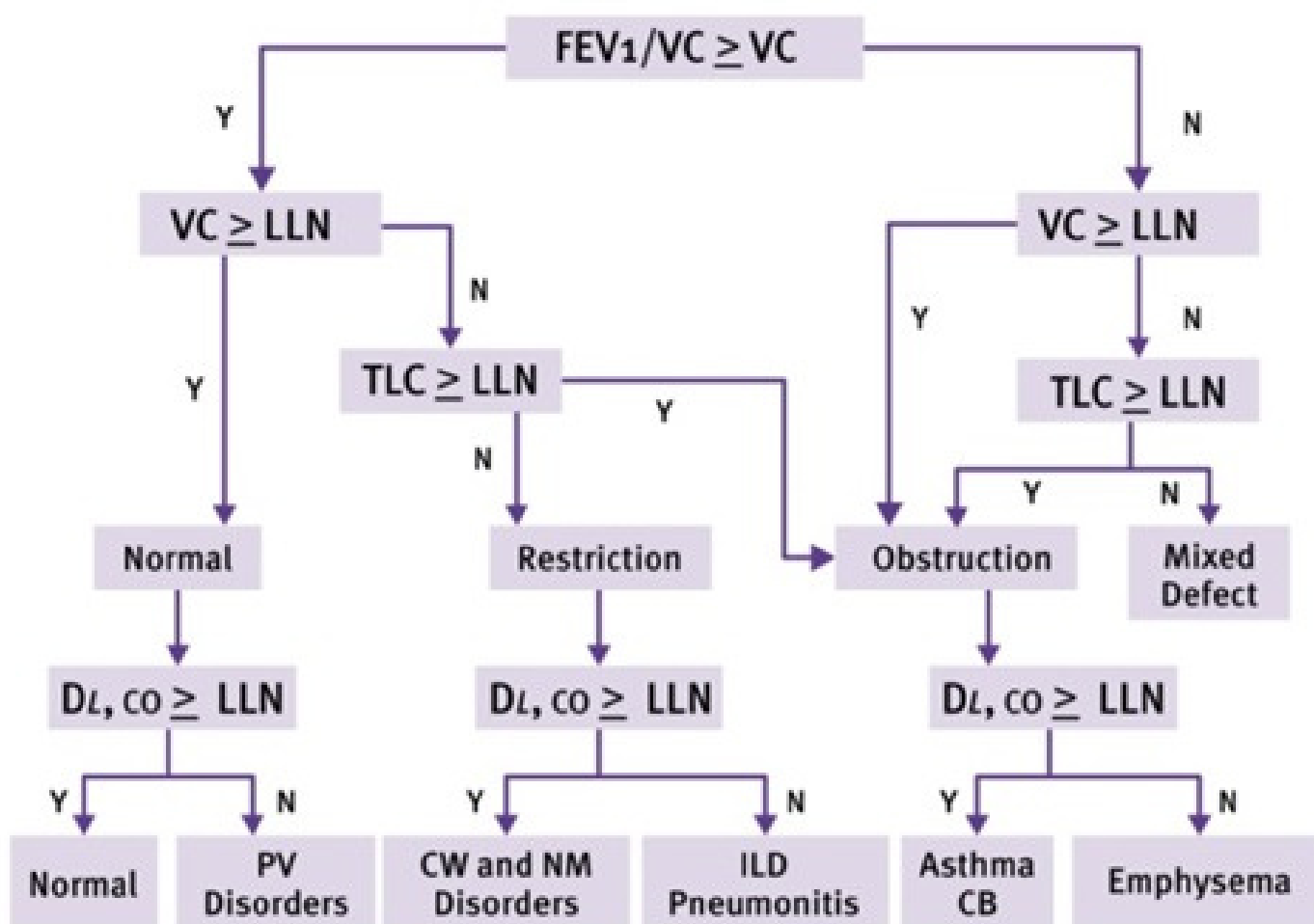



## Conformidade mundial com os padrões

Fique em conformidade com os padrões ATS/ERS e regulamentos específicos do país.

- Totalmente em conformidade com os padrões ATS/ERS 2005 e 2019 e ISO
- Aprovações mundiais
- Aprovação CE
- Aprovação da FDA
- Aprovação do Japão
- Registro Anvisa

## Proteção de segurança cibernética para TI e informações do paciente

Proteja as informações do seu paciente. O EasyOne Pro® é um sistema moderno projetado para atender às suas necessidades de segurança cibernética.

- Windows Defender Antivírus e Firewall
- Atualizações do sistema operacional
- Exportação de banco de dados criptografado
- Autenticação do usuário com logoff automático
- Aprovação da FDA em 2017 com documentação de segurança cibernética

**Para maiores informações entre em contato!**